

TIPLESS-STEINFANGKÖRBCHEN


Steinfangkörbchen in verschiedenen Varianten aus NITINOL, ohne Spitze

SET-INHALT

- Steinfangkörbchen, Körbchen ohne Spitze
- aus Nitinol
- Größen 2,0 Fr/2,5 Fr und 3 Fr
- Drahtanzahl 4, gerade
- Länge 90 cm, bzw. 120 cm
- Drei-Finger-Griff
- Körbchenlänge 30 mm (Ø 15 mm), Drähte sind gerade angeordnet

VORTEIL

- Die spitzenlose Körbchenkonfiguration ermöglicht die direkte Platzierung an der Nierenbeckenschleimhaut, ohne eine Traumatisierung hervorzurufen.
- Ergonomische Griff-Gestaltung, leichte Handhabung
- Hohe Zug-/Druck- und Dreh-Stabilität
- Hohe Aufstellkraft des Steinfangkörbchens im Harnleiter
- Rotationsmöglichkeit des drehstabilen Steinfangkörbchens im Schaft
- Zuspritzmöglichkeit durch Luer-Lock-Ansatz im Griff
- Erleichtertes Fassen von Steinen im Nierenkelch
- Geringere Irritationen durch die Form des Körbchens ohne Spitze

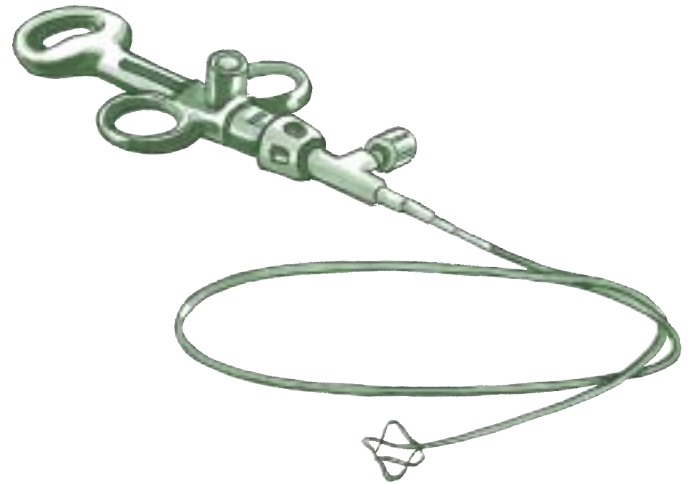

OHNE SPITZE

BESTELLUNG

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Anzahl der Drähte
DO-9920490	2,0	90	4
DO-99254120	2,5	120	4
DO-99304120	3	120	4

Steinfangkörbchen sind nicht für die Lithotripsie geeignet!