

## SET-INHALT

- Superselektive Führungsdrähte, 0.035, L 150cm
- gerade Spitze, **beide Spitzen flexibel**
- schwarz-weiss-Kennung
- Oberfläche PTFE-Mantel
- Hochflexibles, widerstandsfähiges NITINOL
- Superelastischer drehfester Kern


## VORTEIL

- Optimale Röntgensichtbarkeit durch Wolframspitze beidseitig
- Durch schwarz-weiss-Kennung sind Draht-Bewegungen endoskopisch erkennbar
- Gute Gleitfähigkeit durch optimale Oberflächenbeschaffenheit, dadurch ist auch die Sondierung schwieriger Passagen möglich
- Verbesserte Steuerfähigkeit
- Ausgezeichnete Drehstabilität durch superelastischen drehfesten NITINOL-Kern
- Knickstabil
- Superflexible, atraumatische Spitzen zur **Verwendung mit flexiblen Ureterorenoskop optimal geeignet**

## BESTELLUNG

- **Visiomulti-Duo-Führungsdraht, mit 2 flexiblen Enden**

Bestell-Nr.	Größe (inch)	Länge (cm)
ST-36150	0.035	150

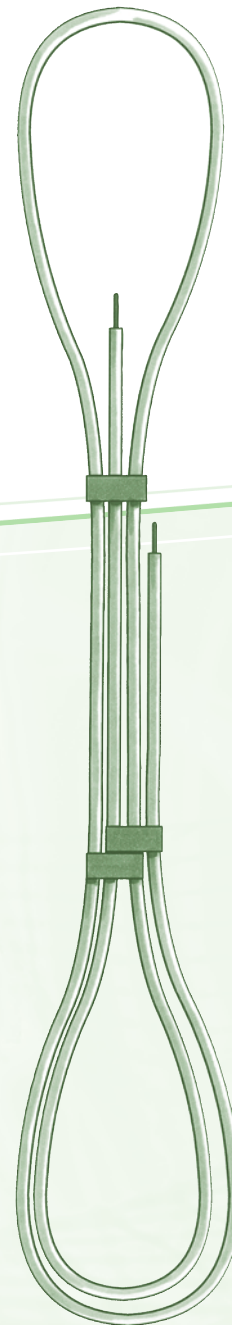

SCHWARZ-WEISS-Kennung des Drahtes