

VISIOCATH-HÄMATURIE- und SPÜL-BALLONKATHETER


Visiocath Soft, 3-Weg, Silikonelastomerbeschichtet
mit Latexkern in verschiedenen Spitzen

AUSFÜHRUNG

- Spülkatheter mit fester Silikonelastomerbeschichtung innen und außen auf einem Latexkern:
Hämaturie-3-Weg-Ballonkatheter mit:
 - NELATON Standard Hohlspitze (KI-06), offen
 - DUFOUR Spitze (KI-07)
 - MERCIER Spitze (KI-08)
 - COUVELAIRE Spitze (KI-09)

VORTEIL

- Der Spülkatheter ist mit einer Kunststoffspirale im Latexkern verstärkt, so dass ein Kollabieren des Katheterlumens bei der Blasenspülung so gut wie ausgeschlossen ist
- Durch die fest verankerte Silikonelastomerschicht auf einem Latexkern, sind die Vorteile von Silikon und Latex in einem Katheter vereinigt
- Sehr gute Gewebeerträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung durch Silikonelastomerschicht
- Der Trichteransatz reißt nicht ein und hält optimal am Stufenverbinder der Beutelsysteme
- Weicher Ballonkatheter mit sehr hohem Tragekomfort
- Der Katheter besitzt eine sehr hohe Ballonstabilität, hierdurch sind Ballonrupturen so gut wie ausgeschlossen.

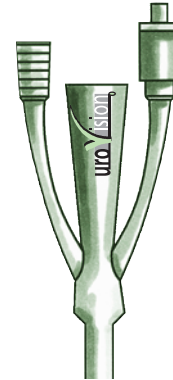


3-Weg

KI-06



NELATON
Standard Hohlspitze

KI-07

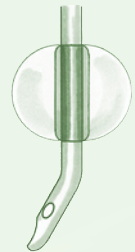

DUFOUR
Spitze

KI-08



MERCIER
Spitze

KI-09



COUVELAIRE
Spitze

BESTELLUNG

- Visiocath Hämaturie,
3-Weg-Spülkatheter Silikonelastomerbeschichtet

mit NELATON Standard
Hohlspitze, offen

mit DUFOUR Spitze

Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
KI-061860	KI-071880	18	40	30 - 50
KI-062060	KI-072080	20	40	40 - 60
KI-062260	KI-072280	22	40	50 - 70
KI-062460	KI-072480	24	40	60 - 80
KI-062660	KI-072680	26	40	60 - 80

mit MERCIER Spitze

mit COUVELAIRE-Spitze

Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
KI-081880	KI-091880	18	40	30 - 50
KI-082080	KI-092080	20	40	40 - 60
KI-082280	KI-092280	22	40	50 - 70
KI-082480		24	40	60 - 80
KI-082680		26	40	60 - 80