

SET-INHALT

- Rektaler Druckmesskatheter mit Halteballon CH 10, 25 cm, Ballonkapazität 10-15 ml, 100% Silikon


VORTEIL

- Rektaldruckmesskatheter aus 100% Silikon. Somit ist die Latexproblematik nicht mehr gegeben bzw. komplett vermieden!
- Halteballon verhindert das Herausgleiten aus dem Rektum bei reduziertem Beckenbodentonus
- Katheterende wird durch eine Schutzhülle vor Stuhl geschützt. Gleichzeitig gewähren die Perforationslöcher der Schutzhülle nach Befüllen mit Wasser eine nahezu unmittelbare Ankopplung an das Druckmilieu im Rektum.
- Dadurch größtmögliche Messgenauigkeit

BESTELLUNG

- Rektaldruckmesskatheter

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
UR-460	10	25

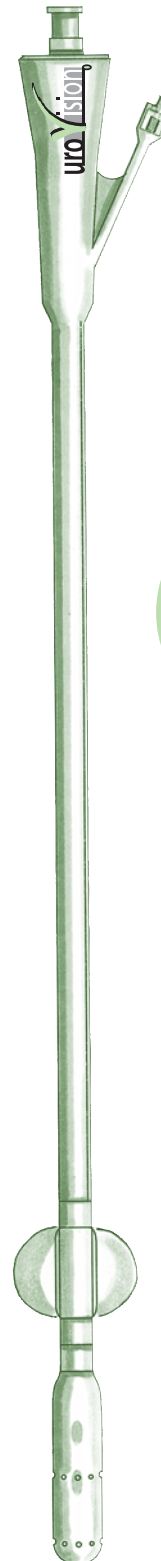

**Katheter aus
100%
Silikon**