

GLYCOcell® SondoFIX® ist ein antimikrobieller Glycerin-Gel-Verband mit einer mikroperforierten Fixierfolie zur professionellen Versorgung perkutaner Stomata, mit Einschlitzen für Dauerkatheter, Sonden und Drainagen.

Die außergewöhnliche Wirkungsweise basiert darauf, dass das Gel Glycerin an die Wunde abgibt, überschüssige Feuchtigkeit aufnimmt und diese sicher in der kompakten Gel-Struktur einschließt.

Lange Wechselintervalle von bis zu 7 Tagen führen nachweislich zu enormer Kosten- und Zeitersparnis.

GLYCOcell® SondoFIX® gewährleistet eine 3-fach-Versorgung von Sonden- und Drainagen-Einstichstellen:

SCHUTZ

Wirksamer Infektionsschutz durch nachweislich bakteriostatische und fungistatische Eigenschaften – auch bei infizierten Einstichstellen.

Das weiche Gel-Kissen ist anschiessam und bietet eine angenehme Polsterung.

PFLEGE

Das Glycerin-Gel hält die Haut um die Einstichstelle geschmeidig und beugt Hypergranulation vor.

Die hygroskopische Eigenschaft des Gels verhindert die Bildung einer „feuchten Kammer“ und fördert die Wundreinigung.

BEOBACHTUNG

Unnötige Verbandwechsel werden vermieden, da die Transparenz des Gel-Kissens und der Fixierfolie eine kontinuierliche Wundbeobachtung ermöglichen.

KLINISCHE ANWENDUNGEN bestätigen

- Signifikante Reduktion der Wundinfektionsrate
- Hohe Kostenersparnis durch lange Wechselintervalle
- Begutachtung der Einstichstelle, sowie Mobilisation der Sonde bei liegendem Verband möglich

BESTELLUNG

• Dreieckiger Sondenverband


Bestell-Nr.	Innenmaß (cm)	Außenmaß (cm)	VE (Stk.)
SF-141605	6,5 x 6,5	11,7 x 11,7	10

Klinische Indikation

→ Perkutane Stomata mit Einlage von temporären oder verweilenden Sonden



Anwendungsbeispiele

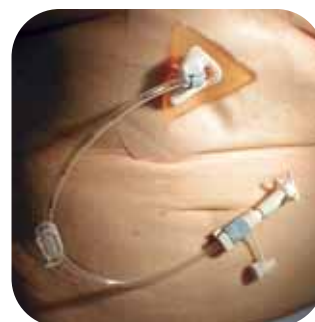

Versorgung von PEG mit GLYCOcell® SondoFIX®



Versorgung von suprapubischem Blasenkatheter mit GLYCOcell® SondoFIX®